


# סדרת כלי יד אורטודונטים E-LINE

קו כלי יד מיצרן O.E.M הגדול באירופה  
מגוון כלים מפלדה גרמנית  
אחריות 5 שנים

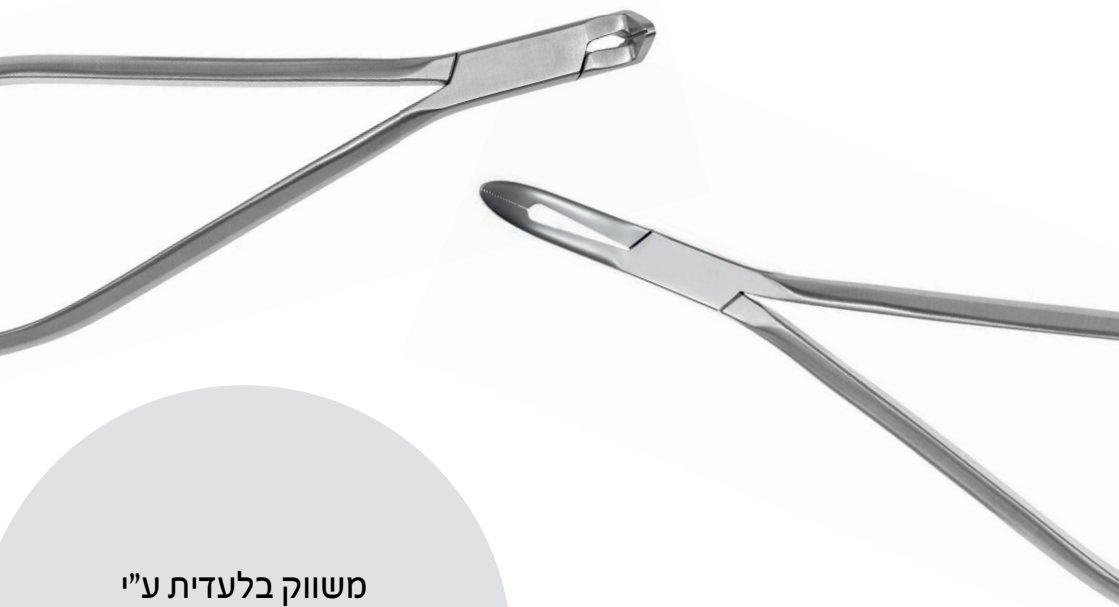

משווק בלעדית ע"י

 **SILMET DISTRIBUTION**  
Exclusive for Dentsply Sirona Orthodontics

**B | BRAUN**

## Cutters

26-110

Hard Wire  
(max) .021" x .025" (min)  $\varnothing$ .014"



**DISTAL CUTTER GOLD**

**SD 1016L-2**

26-112

Hard Wire  
(max) 0.21" x 0.25"(min)  $\varnothing$  0.14"



**LONG HANDLE DISTAL END CUTTER**

**SD 1016**

26-114

Hard Wire  
(max) 0.21" x 0.25"(min)  $\varnothing$  0.14"



**LONG HANDLE DISTAL END CUTTER WITH TC**

**SD 1016L**

26-211

Soft Wire  
(max) 0.12"



**LIGATURE CUTTER, GOLD**

**SD 1002**

## Cutters

26-149

Hard Wire  
(max) 0.28"



**WIRE CURTTER, UPTO 0.7mm GOLD**

**SD 7001**

26-147

max. 0.028"



**HARD WIRE CUTTER**

**SD 1000**

## Pliers

26-032B

max. 0.028"



**WEINGART PLIER UPTO 0.7mm**

**SD 158S**

26-033

max. 0.028"



**WEINGART PLIER UPTO 0.7mm**

**SD 158L**

## Pliers

26-001

Hard Wire  
(max) 0.28"



**HAMMERHEAD CINCH BACK PLIERS**

**SD 461**

26-212



**HOW PLIERS**

**SD 110**

26-030

min. 0.14"  
max. 0.21" - 0.25"



**WIRE BENDING PLIER**

**SD 139**

26-163

max. 0.016"



**THREE PRONG PLIERS**

**SD 200**

## Pliers

26-015

max. 0.028"



**BIRD BEAK PLIERS**

**SD 139B**

26-101

min. 0.14"



**BIRD BEAK PLIER**

**SD 130**

26-014

min. 0.020"




**LONG BEAK LIGHT WIRE PLIERS**

**SD 140**

26-031

max. 0.21" x 0.25"

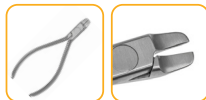

**TWEED ARCH BENDING PLIERS**

**SD 810S**

## Pliers

26-005

min. 0.35 mm  
max. 0.55 x 0.64 mm



**ELASTIC SEPERATOR PLYER**

**SD 101**

26-047



**BRACKET REMOVING PLIERS FOR CERAMIK BRACKETS**

**SD 346C**


26-004



**BRACKET REMOVING ישר**

**SD 346**

26-048

 max. 0.028"



**DIRECT BOND BRACKET REMOVING**

**SD 346-1**

## Pliers

26-028



**BRACKET REMOVING GOLD זווית**

**SD 346-2**

26-010



**BAND REMOVING PLIER LONG**

**SD 347L**

## Specialty Instruments

26-106



**MATHIEU**

**SD 515**

26-003A



**MATHIEU NEEDLE HOLDER, STRAIGHT, 140mm**

**SD 503**

## Specialty Instruments

26-221



**DIRECT BOND TWEEZER**

**SD 500**

26-003



**LIGATURE DIRECTOR**

**SD 507**

26-148




0.22"




**BRACKET HEIGHT GAUGES 0.22**

**SD 11**

26-070

 140 mm

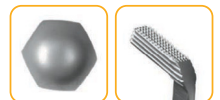

**INSTRUMENT BAND PUSHER**

**SD 300**



## הוראות טיפול ותחזוקה של הכלים

### מאפיינים

מוצר המיוצר מפלדה גרמנית ברמה גבוהה.

### תנאי אחסון

הימנע ממקומות של טמפרטורה גבוהה ולחות.

### טיפול במכשירים

טיפול ותחזוקה נכונה יאריכו מאוד את חיי המכשירים. מכשירים מיועדים למטרה מסוימת ויש להשתמש בהם רק לשם כך. שימו לב שעל כל מכשיר מטבע בלייזר טווח החוטים לחיתוך והכיפוף. מי ברז רגילים מכילים מינרלים העלולים לגרום לשינוי צבע וכתמים. אָנו מומלץ להשתמש במים מזוקקים לניקוי, חיטוי, עיקור ושטיפה. להשתמש בתמיסת ניקוי עם pH קרוב לניטרלי (7).

### הכנה לעיקור

לצורך עיקור יש לייבש היטב כל מכשיר לארוז בנפרד בנייר חד-פעמי מתאים, או על משטח מיוחדים. אין להכניס מכשיר רטוב. חייבים להציב כלים כבדים תמיד בחלק התחתון של המכשיר החיטוי. אסור להשתמש בשמן תעשייתי.

### עיקור

לצורך עיקור ניתן להשתמש בשיטות החיטוי האדים או בטמפרטורות נמוכות. יש להקפיד על ההנחיות לעיקור הקבועות לפי תקנות והוראות לשימוש בצידוד סטריליזציה. במהלך עיקור או תהליך חיטוי המכשירים אינם יכולים להיחשף לטמפרטורות גבוהות יותר מעל 200°C (392°F).

### אחריות

אנו מעניקים אחריות ל-5 שנים למכשירים. האחריות חלה בתנאי שמשתמשים במוצר בהתאם לשימוש המיועד לו.

### האחריות אינה כוללת

- טיפול לא תקין במהלך הליכי ניקוי ותחזוקה
- שימוש בחומרי חיטוי או חומרי ניקוי שאינם מתאימים
- שימוש בחומרי סוכה לא מתאימים
- עיקור לא מתאים, למשל עם שימוש בקיטור עיקור בכמות בלתי הולמת



משווק בלעדית ע"י

 **SILMET DISTRIBUTION**

Exclusive for Dentsply Sirona Orthodontics

רחוב הסדנא 12 אור-יהודה  
טל': 03-5332477, 03-5332283  
רוזי מרום- 054-4243387

